



Guide
d'utilisation du
Spooky2
Scalaire

Avril 2019
Equipe Spooky2

Spooky 2

SOMMAIRE

Tour d'horizon	1
Vue détaillée.....	2
Branchements	3
Synchronisation.....	3
Application de l'énergie scalaire	5
Scalaire pur.....	5
Scalaire moléculaire	5
Scalaire Rife	6
Association des méthodes.....	7
Notes importantes.....	8
Spécifications techniques.....	8

Tour d'horizon

Pour être en bonne santé, nos cellules ont besoin de communiquer les unes avec les autres. Cette communication utilise des champs scalaires. Lorsque cette communication est bloquée ou imparfaite, notre corps devient malade. Spooky Scalar peut restaurer les mécanismes de guérison naturels de notre corps.

Spooky Scalar est le premier appareil de traitement scalaire à proposer trois méthodes différentes d'envoi d'ondes scalaires soignantes. Vous pouvez choisir parmi ces méthodes celle qui vous convient le mieux. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre "Application de l'énergie scalaire".

Spooky Scalar est composé de deux valises noires. L'une est appelé Transmetteur (Transmitter), et l'autre Récepteur (Receiver). Le transmetteur est à brancher sur le secteur et doit être ajusté. Toute personne entre les deux valises reçoit des ondes scalaires biologiques. Un soin scalaire commence déjà, aussi simplement que cela.



Vue détaillée

Panneau du Transmetteur



Panneau du Recepteur



Branchements

Le branchement s'effectue en 4 étapes :

- Placez le transmetteur et le récepteur de part et d'autre d'une chaise ou d'un lit. Le transmetteur et le récepteur doivent être le plus alignés possible, leurs couvercles "dos à dos".
- Connectez le transformateur 12 Volts sur la fiche d'alimentation du transmetteur (Pow).
- Connectez le câble de liaison aux 2 valises (fiches Ban-A et Ban-B).
- Tournez l'interrupteur en position ON puis ajustez la fréquence pour établir la synchronisation.

Synchronisation

Tout comme une radio, Spooky Scalar nécessite un ajustement. Cet ajustement est nécessaire pour que le transmetteur et le récepteur soient synchronisés. C'est uniquement lorsque les 2 dispositifs sont synchronisés que l'onde scalaire est présente.

Remarque importante


La fréquence d'ajustement pour synchroniser le dispositif se situe entre 5.5 MHz et 7 MHz. Cette fréquence est à déterminer à chaque fois que vous branchez le dispositif. Ce ne sera pas forcément la même valeur que celle d'un précédent réglage, même si les valises n'ont pas changé de place.

Spooky Scalar

Tournez le bouton de réglage de fréquence dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le témoin lumineux brille à son premier maximum d'intensité.



Pour contrôler qu'il y a bien un ajustement, le bouton poussoir sur le récepteur devrait être allumé lorsqu'il est enfoncé. Pendant les soins, ne laissez pas le bouton poussoir enfoncé car il consomme de l'énergie qu'il vaut mieux laisser au soin. re.

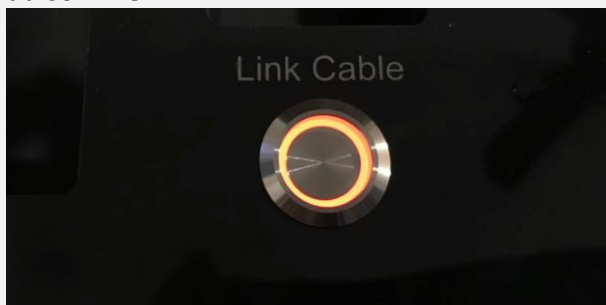

Application de l'énergie scalaire

Spooky Scalar peut appliquer l'énergie scalaire de trois manières différentes ; scalaire pur, scalaire moléculaire et scalaire de Rife.

Scalaire pur

C'est la façon la plus simple d'appliquer l'énergie scalaire car il n'y a rien d'autre à faire que de mettre en fonctionnement le dispositif. Synchronisez Spooky Scalar, puis asseyez-vous ou couchez-vous entre le transmetteur et le récepteur. L'énergie scalaire pure s'écoule ensuite entre le transmetteur et le récepteur, au travers de vous.

Scalaire moléculaire

Le signal scalaire peut être amélioré en plaçant une substance sur la bobine réceptrice. Les molécules dans l'échantillon vont informer le signal entre les valises et vous obtenez l'effet curatif du produit chimique. La substance peut être des huiles essentielles ou des médicaments. Par exemple, vous pouvez placer de l'huile essentielle de menthe poivrée sur la bobine réceptrice et vous obtiendrez ses bienfaits.



Des études scientifiques ont prouvé que l'information seule peut causer la destruction des pathogènes. Les cellules cancéreuses empoisonnées sur la bobine réceptrice induiront la mort des cellules cancéreuses de votre corps. L'information des cellules mourantes est transmise à vos cellules cancéreuses internes, et elles meurent également.

Scalaire Rife

La troisième façon d'utiliser les ondes scalaires est la modulation avec des fréquences de Rife. Cela combine les découvertes de Royal Rife et de Nikola Tesla. Royal Rife a constaté que les pathogènes vibrent à une fréquence particulière. Spooky Scalar peut appliquer cette fréquence en utilisant des ondes scalaires comme porteuses. Seul Spooky Scalar peut moduler les fréquences originales de Royal Rife. Il transforme Spooky Scalar en la machine de Rife la plus avancée au monde.

Après la synchronisation de Spooky Scalar, connectez un générateur Spooky au connecteur "BNC" de la valise du transmetteur. Asseyez-vous entre le transmetteur et le récepteur pendant le déroulement des programmes. Spooky Scalar accepte n'importe quelle fréquence de la base de données très riche de Spooky.



Association des méthodes

Vous pouvez mettre un verre d'eau sur la bobine du transmetteur pendant les traitements Scalaire Moléculaire ou Scalaire Rife. Ce processus permet d'informer l'eau. Après avoir terminé le soin, vous pouvez boire cette eau pendant la journée pour en améliorer les effets.

Les méthodes de modulation Scalaire-Moléculaire et Scalaire-Rife peuvent être utilisées simultanément pour améliorer encore l'efficacité des traitements. Par exemple, pour traiter le cancer, vous pouvez placer de l'huile essentielle d'oliban (résine de l'arbre à encens), de menthe poivrée, de lavande, d'onagre ou d'agrumes sur la bobine réceptrice et exécuter des programmes tuant le cancer sur le générateur Spooky connecté.

Autre exemple, une personne atteinte de cancer peut aussi placer un médicament de chimiothérapie sur la bobine réceptrice pour provoquer la mort du cancer dans son corps. Ajouter une toxine cancéreuse à un échantillon d'urine ou de sang et la placer sur la bobine réceptrice améliorera encore les résultats, car l'information sur les cellules cancéreuses mourantes sera transférée aux cellules cancéreuses du corps.

Notes importantes

1. Faites une synchronisation avant chaque traitement. La fréquence d'ajustement peut varier chaque jour en fonction de la température et de l'humidité, ainsi que de la disposition de la machine.
2. Le transmetteur et le récepteur doivent être le plus alignés possible, leurs couvercles "dos à dos".
3. Maintenez le câble de liaison reliant le transmetteur et le récepteur à distance du métal. Il ne doit pas faire de boucle sur son chemin. Si le câble est trop long, faites-lui faire des S.
4. Les personnes enceintes ou ayant un stimulateur cardiaque ne doivent pas utiliser le Spooky Scalar.
5. Les traitements de nuit sont parfaitement fiables. Il n'existe pas de "fatigue fréquentielle" due à l'exposition aux champs scalaires. Votre corps prend ce dont il a besoin et ignore le reste.

Spécifications techniques

Taille de chaque unité : 170mm (H) x 360 (L) x 290 (l)

Poids : 5.5 kg

Alimentation : 12 VDC 2A

Courant maximum en entrée : 0.6A

Plage de Fréquence : 1.00 MHz – 8.00 MHz

Pas de Fréquence : 50 kHz

Flux Scalaire : 30mA

SPOOKY 2